

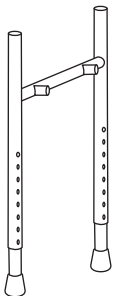
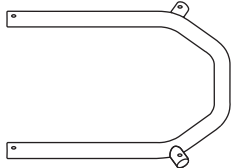
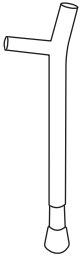
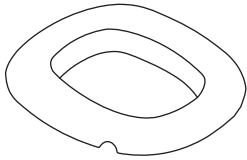
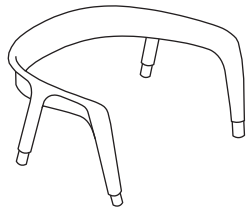



Let's Help Me

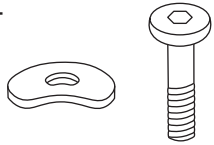


x 1 	x 1 	x 2 
x 1 	x 1 	x 4  x 1 

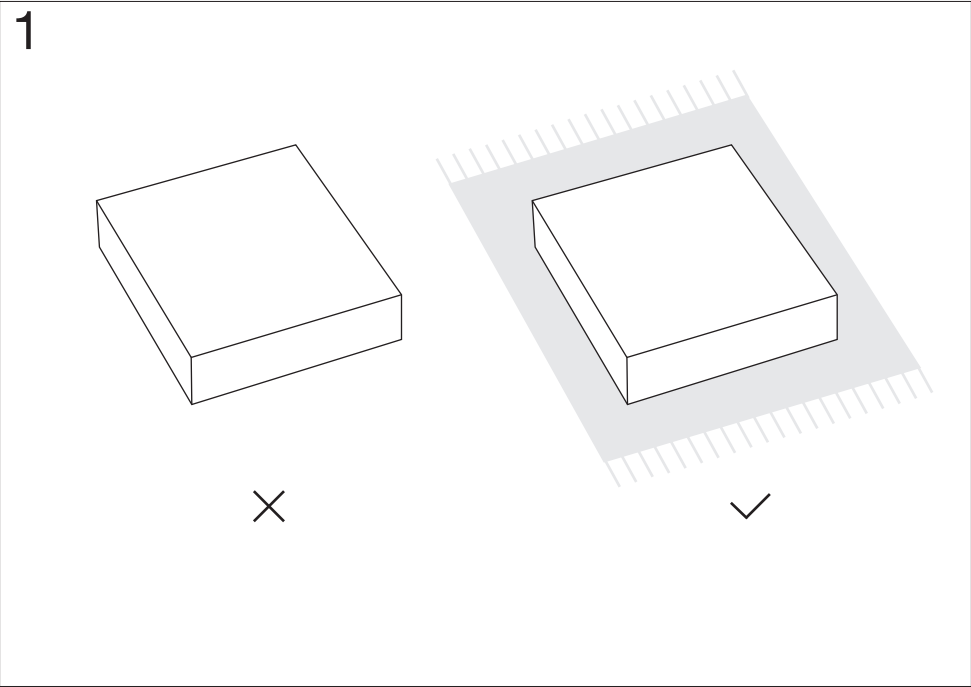


2

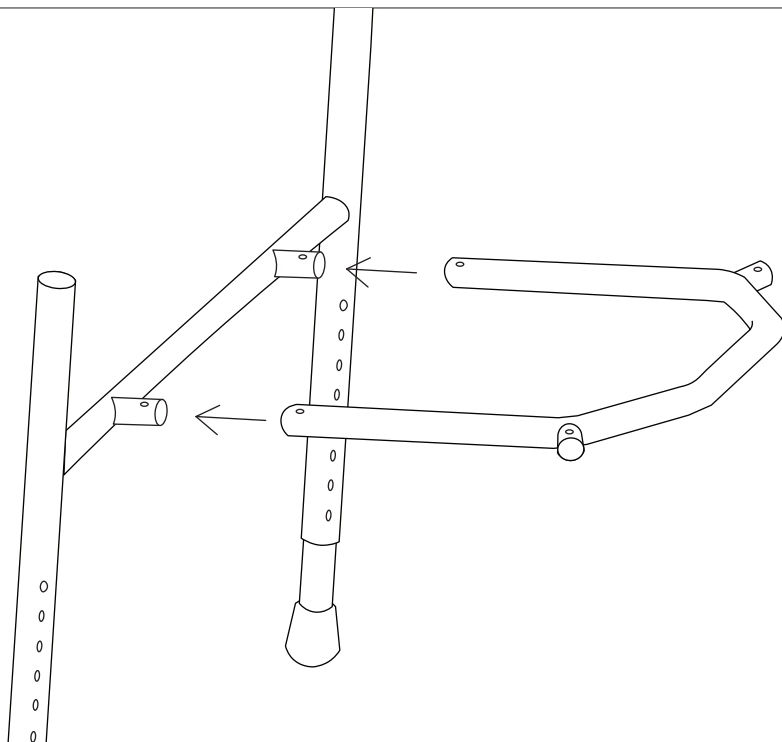


3




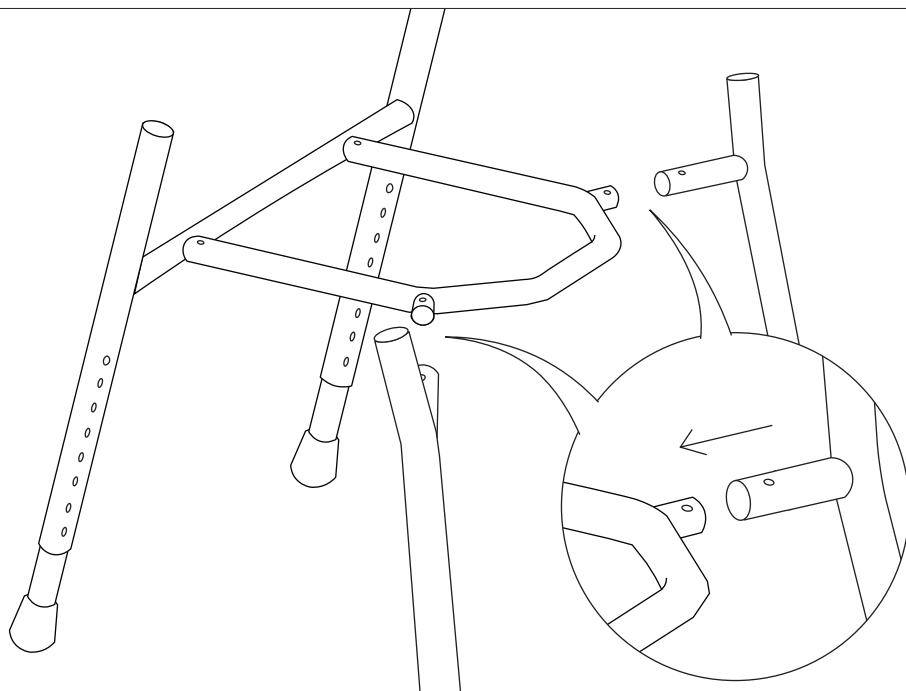


4

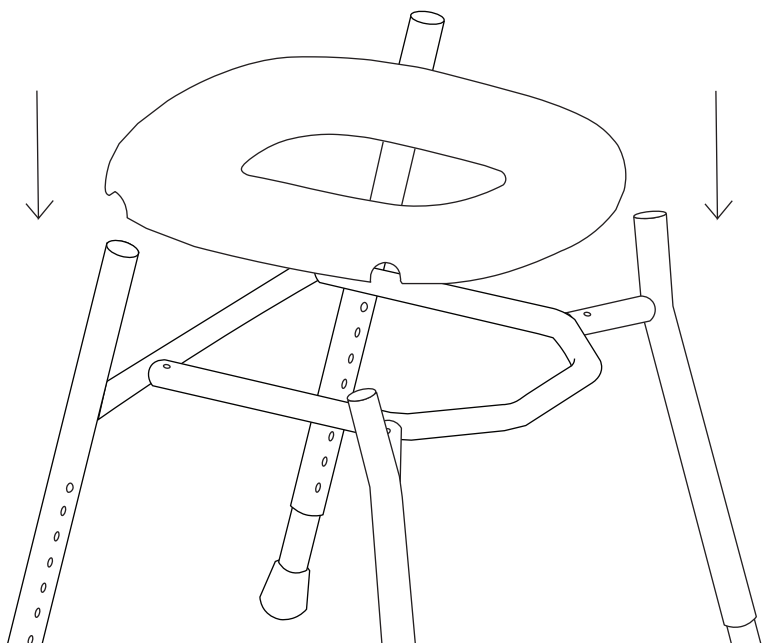


5

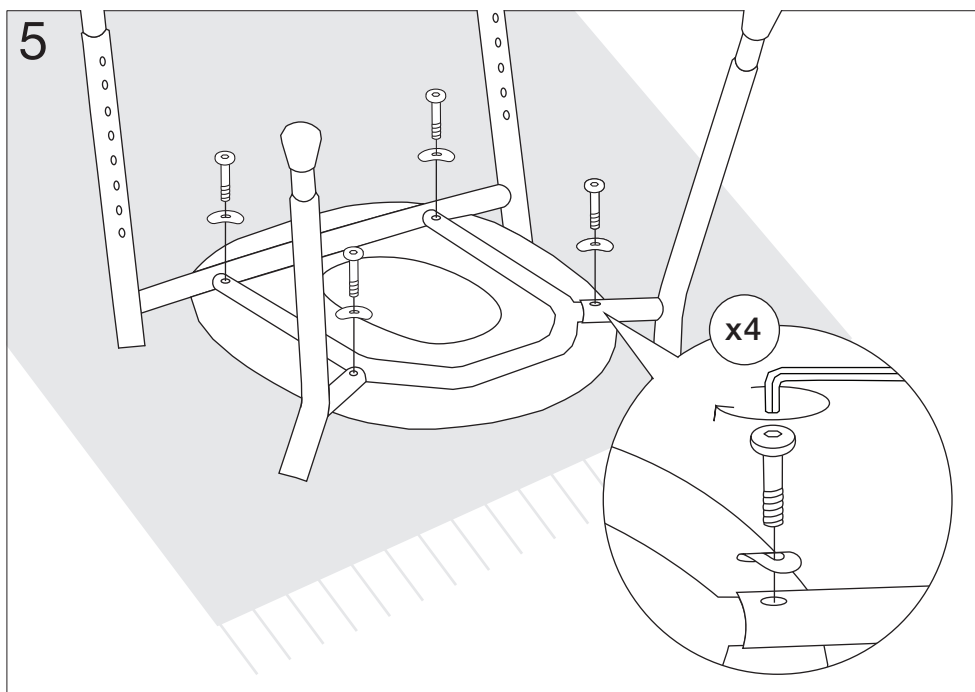


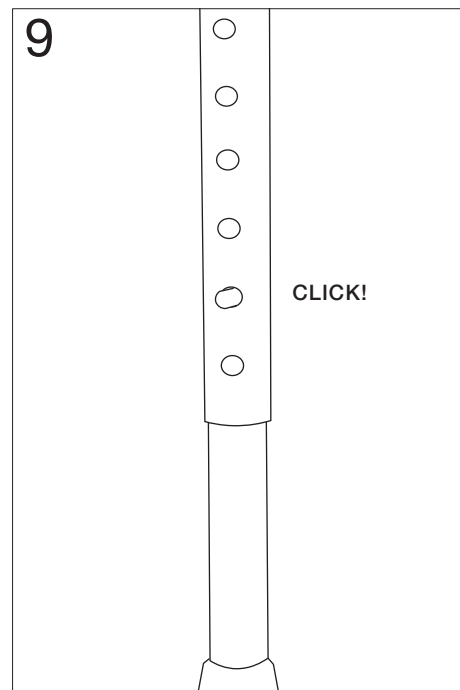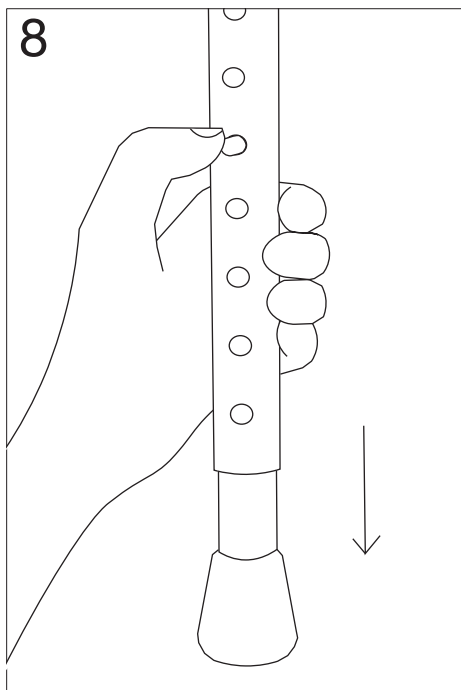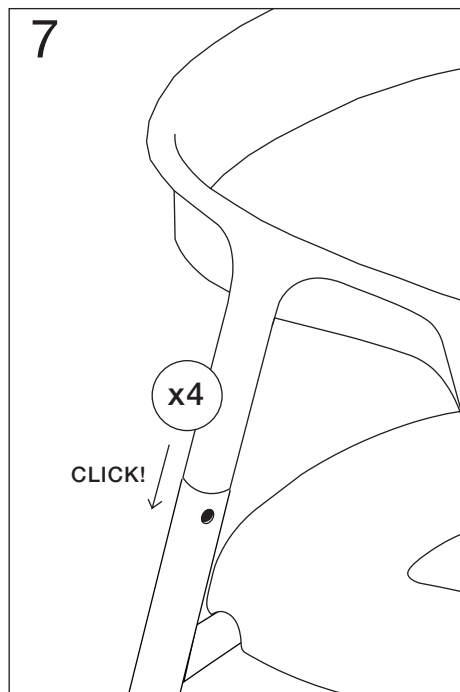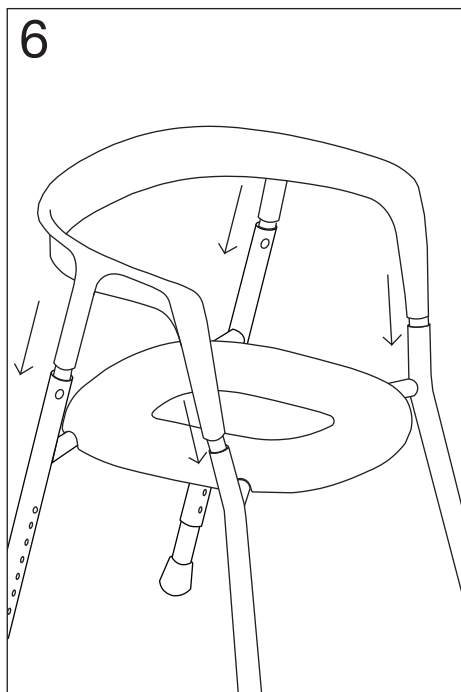


10

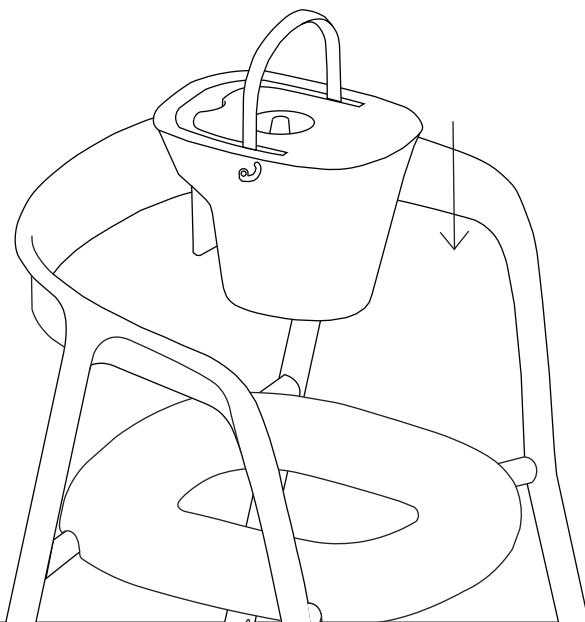


11

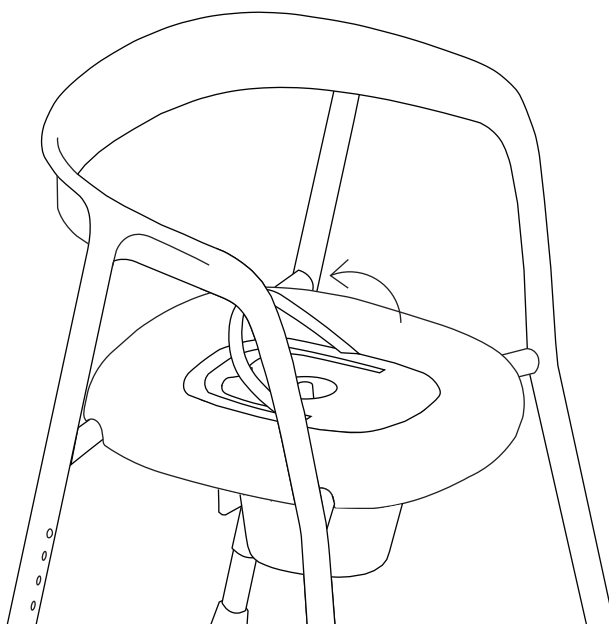

12

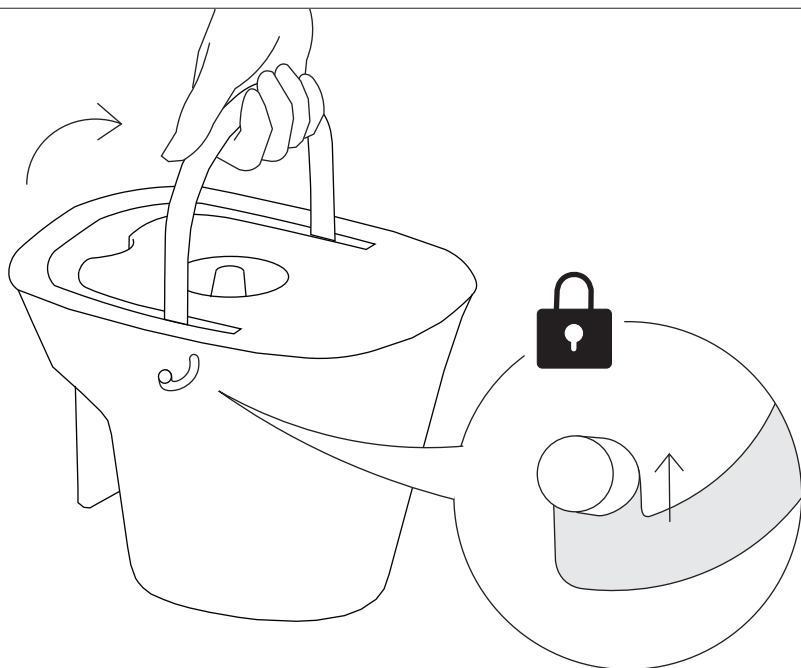

13

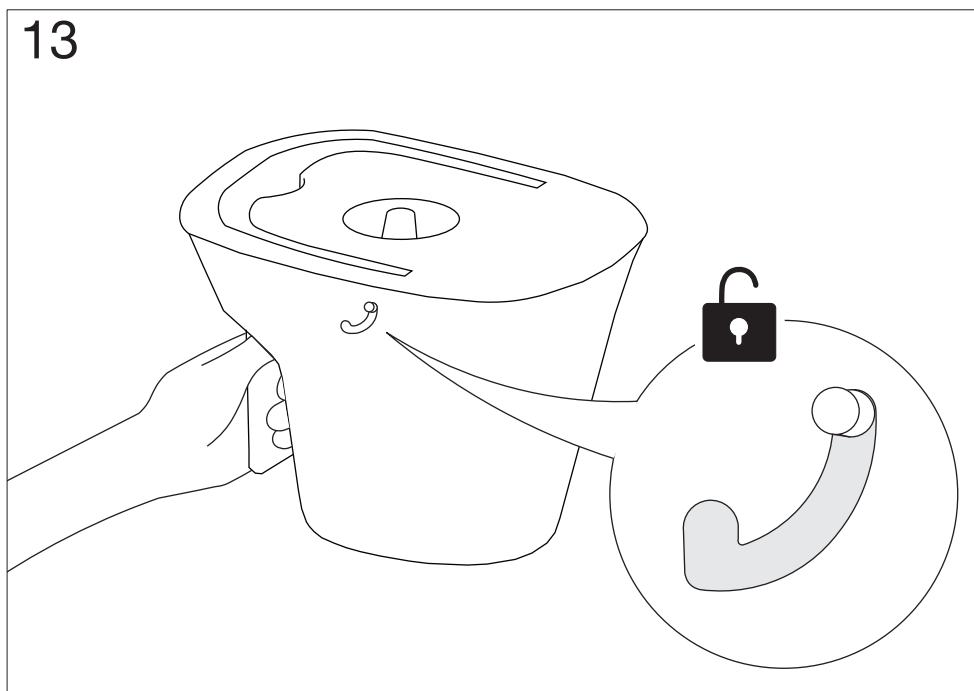

Let's Help Me. Toalettförhöjning.

Trust Care gratulerar till er nya modern designade toalettförhöjare. OBS, Viktigt att läsa bruksanvisning innan användning.

Syfte & användning; Toalettförhöjning är det perfekta valet för er som vill kunna resa er smidigare från toaletsitsen, med hjälp av Let's help me kan du nu enkelt ställa in önskad sitthöjd vid toalettbesök efter dina behov. Inte nog med detta kan du även med hjälp av baljan som placeras enkelt (se bild 10 & 11) använda produkten som fristående toalett. Vid tömning sätter man enkelt på locket som man sedan lyfter i handtaget vilket då låser sig automatiskt (se bild 12).

Med dom teleskopiska benen kan du enkelt ställa in önskad höjd och med antiglid fötterna gjorda av gummi kan du placera produkten på vilket underlag som helst för att få ett stabilt fäste (Se även bild 8 & 9). Rygg & armstöd har en bekväm och ergonomisk design som underlättar vid upp och nedstigning, då denna produkt även är vattentålig kan man dessutom använda den som pall i badrum eller i duschen.

OBS: Produkten är INTE avsedd att stå på.

Säkerhetsanvisning; Produkten skall inte användas på annat sätt än vad den är avsedd för. Trust Care ansvarar inte om produkt används, monteras eller ändras på annat sätt än vad som anges i denna beskrivning.

Kontrollera regelbundet produktens stabilitet och styrka samt att skruvar är ordentligt åtdragna vid montering.

Underhåll & skötsel; Av hygienskäl är det rekommenderat att rengöra produkten regelbundet. Rengöringsmedel utan lösningssmedel med pH-värde på 5-9 eller desinfektionssprit på 70% rekommenderas. Vid behov kan produkten dekontamineras i max 85 grader i ca 3 min.


Garanti; Trust Care erbjuder ett års garanti, garantin täcker dock inte vanligt slitage tex av gummifötter.

Tekniska data:



Testad enligt ISO 17966:2016,
EN ISO 10993-1 för en max
användarvikt på 160 kg.

Höjd	64 - 81 cm
Sitthöjd	41 - 58 cm
Djup	51 - 59 cm
Bredd	59 - 64 cm
Vikt	3.1 kg

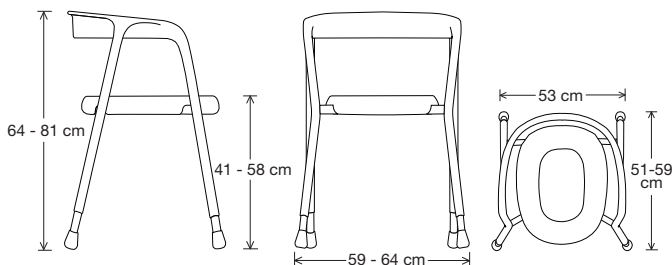

Let's Help Me. Commode.

Trust Care congratulates you on your new modern designed commode. Please note, it's important to read the manual before use.

Purpose & Use; A commode is the perfect choice for those of you who want to be able to get up more smoothly from the toilet seat, with help from Let's help Me, you can now easily set the desired seat height when visiting the toilet according to your needs. Not only this, you can also use the tub, which is easily placed (see pictures 10 & 11), to use the product as a free-standing toilet. When emptying, you simply put the lid on, which you then lift by the handle, which then locks automatically (see picture 12).

With the telescopic legs, you can easily set the desired height and with the anti-slip feet made of rubber, you can place the product on any surface to get a stable attachment (See also pictures 8 & 9). Back & armrests have a comfortable and ergonomic design that facilitates getting up and down, as this product is also water resistant, you can also use it as a stool in the bathroom or in the shower.

NOTE: The product is NOT intended to stand on.

Safety instructions: The product must not be used in any way other than what it is intended for. Trust Care is not responsible if the product is used, assembled, or modified in a way other than what is stated in this description. Regularly check the stability and strength of the product and that screws are properly tightened during assembly.

Maintenance & care; For hygiene reasons, it is recommended to clean the product regularly. Solvent-free cleaners with a pH of 5-9 or 70% rubbing alcohol are recommended. If necessary, the product can be decontaminated at a maximum of 85 degrees for approx. 3 min.

Guarantee: Trust Care offers a one-year warranty, however, the warranty does not cover normal wear and tear, e.g. of rubber feet.

Technical Data

CE

Tested according to: ISO 17966:2016, EN ISO 10993-1 for a maximum user weight of 160 kg.

Height	64 - 81 cm
Seat height	41 - 58 cm
Depth	51 - 59 cm
Width	59 - 64 cm
Weight	3.1 kg

The technical drawings illustrate the commode from three perspectives: side, front, and top. The side view shows the telescopic legs with a height range of 64-81 cm and the seat height range of 41-58 cm. The front view shows the seat height range of 41-58 cm and the base width of 59-64 cm. The top view shows the seat width of 53 cm and the depth of the seat area as 51-59 cm.

Let's Help Me. Toiletstol.

Trust Care ønsker dig tillykke med din nye, moderne designede toiletstol. Bemærk, at det er vigtigt at læse brugervejledningen før brug.

Formål og anvendelse; En toiletstol er det perfekte valg til dig, der gerne vil kunne rejse dig mere smidigt fra toiletsædet, og med hjælp fra Let's help Me kan du nu nemt indstille den ønskede sædehøjde ved toiletbesøg efter dine behov. Ikke nok med det, du kan også bruge karret, som er let at placere (se billede 10 og 11), til at bruge produktet som et fritstående toilet. Ved tømning sætter man blot låget på, som man derefter løfter i håndtaget, der låser automatisk (se billede 12).

Med teleskop-benene kan du nemt indstille den ønskede højde, og med de skridsikre fødder af gummi kan du placere produktet på enhver overflade og få en stabil fastgørelse (se også billede 8 og 9). Ryg- og armlæn har et behageligt og ergonomisk design, der gør det lettere at komme op og ned, og da dette produkt også er vandafvisende, kan du også bruge det som skammel på badeværelset eller i brusebadet.

BEMÆRK: Produktet er IKKE beregnet til at bruges som stol.

Sikkerhedsinstruktioner; Produktet må ikke bruges på nogen anden måde, end det er beregnet til. Trust Care er ikke ansvarlig, hvis produktet bruges, samles eller ændres på en anden måde, end hvad der er angivet i denne beskrivelse. Kontrollér regelmæssigt produktets stabilitet og styrke, og at skruerne er spændt korrekt under monteringen.

Vedligeholdelse og pleje: Af hygiejniske årsager anbefales det at rengøre produktet regelmæssigt.

Opløsningsmiddelfrie rengøringsmidler med en pH-værdi på 5-9 eller 70 % sprit anbefales. Hvis det er nødvendigt, kan produktet dekontamineres ved maks. 85 grader i ca. 3 min.


Garanti; Trust Care tilbyder et års garanti, men garantien dækker ikke normal slitage, f.eks. af gummifødder.

Tekniske data



Testet i henhold til ISO 17966:2016, EN ISO 10993-1 for en maksimal vægt på 160 kg.

Højde	64 - 81 cm
Sædehøjde	41 - 58 cm
Dybde	51 - 59 cm
Bredde	59 - 64 cm
Vægt	3.1 kg

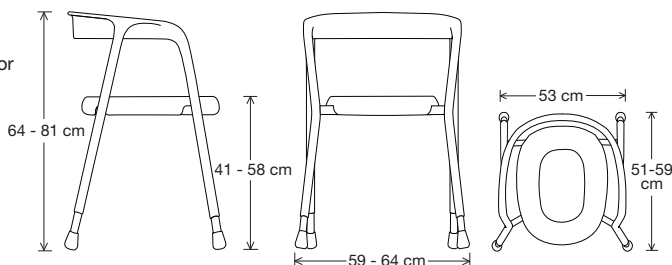

Let's Help Me. Toilettenstuhl.

Trust Care gratuliert Ihnen zu Ihrem neuen, modern gestalteten Toilettenstuhl. Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, vor der Verwendung das Handbuch zu lesen.

Zweck und Verwendung; Ein Toilettenstuhl ist die perfekte Wahl für Kunden, die bequemer vom Toilettensitz aufstehen möchten. Mit Hilfe von Let's help Me können Sie jetzt ganz einfach die gewünschte Sitzhöhe beim Toilettenbesuch ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Darüber hinaus können Sie die einfach aufzustellende Wanne (siehe Bilder 10 und 11) auch als freistehende Toilette nutzen. Zum Entleeren setzen Sie einfach den Deckel auf. Der Deckel verfügt über eine automatische Verriegelung wenn der Deckel am Griff angehoben wird (siehe Bild 12).

Mit den Teleskopbeinen können Sie ganz einfach die gewünschte Höhe einstellen und mit den Anti-Rutsch-Füßen aus Gummi können Sie das Produkt stabil auf jeder Oberfläche platzieren (siehe auch Bilder 8 & 9). Die Rücken- und Armlehnen haben ein komfortables und ergonomisches Design, das das Auf- und Absteigen erleichtert. Da dieses Produkt außerdem wasserabweisend ist, können Sie es auch als Hocker im Badezimmer oder in der Dusche verwenden.

ANMERKUNG: Nicht auf das Produkt stellen.

Sicherheitshinweise; Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Trust Care übernimmt keine Verantwortung, wenn das Produkt anders als in dieser Beschreibung angegeben verwendet, zusammengebaut oder verändert wird. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Festigkeit des Produkts sowie das ordnungsgemäße Anziehen der Schrauben bei der Montage.


Wartung & Pflege; Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, das Produkt regelmäßig zu reinigen. Empfohlen werden lösungsmittel-freie Reiniger mit einem pH-Wert von 5-9 oder 70 % Reinigungsalkohol. Bei Bedarf kann das Produkt ca. 3 Minuten bei maximal 85 Grad dekontaminiert werden.

Garantie; Trust Care bietet eine einjährige Garantie. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf normale Abnutzung, z. B. von Gummifüßen.

Technische Daten

Getestet nach ISO 17966:2016,
EN ISO 10993-1 für ein maximales
Gewicht von 160 kg.

Höhe	64 - 81 cm
Sitzhöhe	41 - 58 cm
Tiefe	51 - 59 cm
Breite	59 - 64 cm
Gewicht	3.1 kg

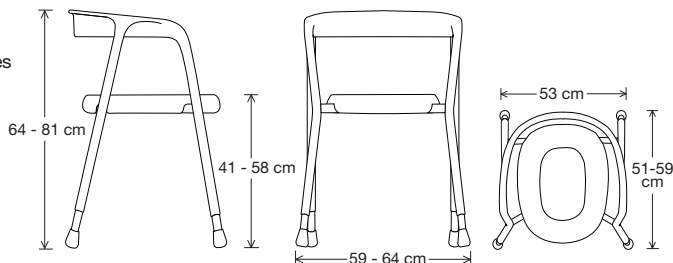

Let's Help Me. Tapa del inodoro.

Trust Care le felicita por la adquisición de su nueva tapa del inodoro. Tenga en cuenta que es importante leer el manual antes de utilizarla.

Propósito y uso; Una tapa de inodoro es la elección perfecta para aquellos que quieran tener la posibilidad de levantarse más suavemente del asiento del inodoro, con la ayuda de Let's help Me, ahora puede ajustar fácilmente la altura deseada del asiento, de acuerdo a sus necesidades, cuando utilice el inodoro. Y no sólo eso, también puede utilizar la bañera, que se coloca fácilmente (véanse las imágenes 10 y 11), para utilizar el producto como inodoro suspendido. Al vaciarlo, solo debe colocar la tapa y levantarla por el asa, que se bloquea automáticamente (véase la imagen 12).

Con las patas telescópicas, puede ajustar fácilmente la altura deseada y con los pies antideslizantes de goma, puede colocar el producto en cualquier superficie para obtener una fijación estable (Vea también las imágenes 8 y 9). El respaldo y los reposabrazos tienen un diseño cómodo y ergonómico que facilita el levantarse y sentarse, como este producto también es resistente al agua, también puede utilizarlo como taburete en el baño o en la ducha.

NOTA: El producto NO está pensado para subirse sobre él.

Instrucciones de seguridad; El producto no debe utilizarse de forma distinta a la prevista. Trust Care no se hace responsable si el producto se utiliza, monta o modifica de forma distinta a la indicada en esta descripción. Compruebe regularmente la estabilidad y resistencia del producto y que los tornillos estén bien apretados durante el montaje.

Mantenimiento y cuidado; Por razones de higiene, se recomienda limpiar el producto con regularidad. Se recomiendan limpiadores sin disolventes con un pH de 5-9 o alcohol isopropílico al 70%. En caso necesario, el producto puede descontaminarse a un máximo de 85 grados durante aproximadamente 3 min.


Garantía; Trust Care ofrece un año de garantía. Sin embargo, la garantía no cubre el desgaste normal, por ejemplo, de los pies de goma.


Datos técnicos



Probado según ISO 17966:2016,
EN ISO 10993-1 para un peso
máximo de pã 160 kg.

Altura	64 - 81 cm
Altura del asiento	41 - 58 cm
Profundidad	51 - 59 cm
Anchura	59 - 64 cm
Peso	3.1 kg

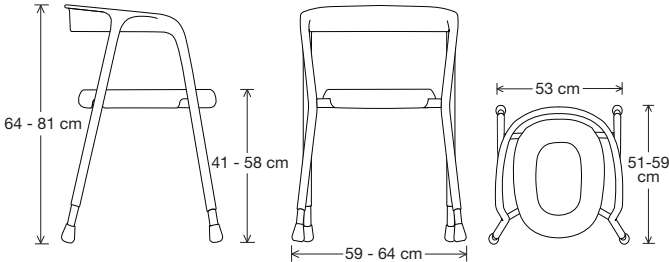

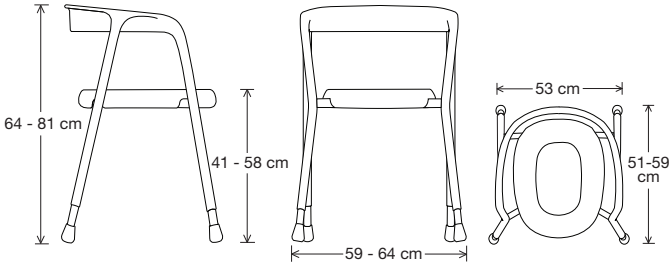

Let's Help Me. Commode.

Trust Care vous félicite pour votre nouvelle commode au design moderne. Veuillez noter qu'il est important de lire le manuel avant utilisation.

But et utilisation ; une commode est le choix parfait pour celles et ceux d'entre vous qui veulent être en mesure de se lever plus en douceur du siège de toilette, avec l'aide de Let's help Me, vous pouvez maintenant facilement définir la hauteur de siège souhaitée selon vos besoins, lors de votre passage aux toilettes. Non seulement cela, mais vous pouvez également utiliser la baignoire, qui se place facilement (voir photos 10 et 11), pour utiliser le produit comme toilette autoportante. Lors de la vidange, vous mettez simplement le couvercle, que vous soulevez ensuite par la poignée, qui se verrouille alors automatiquement (voir image 12).

Avec les pieds télescopiques, vous pouvez facilement régler la hauteur souhaitée et avec les pieds antidérapants en caoutchouc, vous pouvez placer le produit sur n'importe quelle surface pour obtenir une fixation stable (voir aussi photos 8 et 9). Dossier et accoudoirs ont un design confortable et ergonomique qui facilite les montées et descentes, car ce produit est également résistant à l'eau, vous pouvez aussi l'utiliser comme tabouret dans la salle de bain ou sous la douche.

NOTE : Le produit n'est PAS conçu pour que l'on se tienne debout dessus.

Consignes de sécurité ; le produit ne doit pas être utilisé autrement que ce à quoi il est destiné. Trust Care n'est pas responsable si le produit est utilisé, assemblé ou modifié d'une autre manière que ce qui est indiqué dans cette description. Vérifiez régulièrement la stabilité et la résistance du produit et que les vis sont bien serrées lors du montage.


Maintenance et entretien ; pour des raisons d'hygiène, il est recommandé de nettoyer régulièrement le produit. Les nettoyeurs sans solvant avec un pH de 5-9 ou 70 % d'alcool à friction sont recommandés. Si nécessaire, le produit peut être décontaminé à 85 degrés maximum pendant environ 3 min.

Garantie ; Trust Care offre une garantie d'un an, cependant, la garantie ne couvre pas l'usure normale, par exemple celle des pieds en caoutchouc.

Caractéristiques techniques

Testé selon ISO 17966:2016,
EN ISO 10993-1 pour un
poids maximal d'env. 160 kg.

Hauteur	64 - 81 cm
Hauteur du siège	41 - 58 cm
Profondeur	51 - 59 cm
Largeur	59 - 64 cm
Poids	3.1 kg

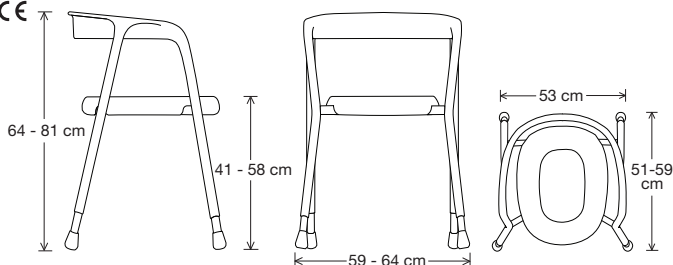

Let's Help Me. Comoda.

Trust Care si congratula con voi per la vostra nuova sedia comoda dal design moderno. È importante leggere il manuale prima dell'uso.

Scopo e uso; La sedia comoda è la scelta perfetta per chi desidera alzarsi più agevolmente dal water; con l'aiuto di Let's help me, quando si va in bagno è possibile impostare facilmente l'altezza della seduta in base alle proprie esigenze. Non solo, utilizzando il secchio, facilmente posizionabile (vedere figure 10 e 11), si avrà a disposizione una toilette indipendente. Per lo svuotamento è sufficiente posizionare il coperchio e sollevarlo dal manico in modo che si blocchi automaticamente (vedere figura 12).

Grazie alle gambe telescopiche è possibile impostare facilmente l'altezza desiderata mentre i piedini antiscivolo in gomma consentono di posizionare il prodotto su qualsiasi superficie per ottenere un fissaggio stabile (vedere anche le figure 8 e 9). Lo schienale e i braccioli hanno un design comodo ed ergonomico che rende agevole sedersi e alzarsi. Poiché questo prodotto è resistente all'acqua, può essere utilizzato anche come sgabello in bagno o sotto la doccia.

NOTA: NON salire in piedi sul prodotto

Istruzioni di sicurezza; Il prodotto non deve essere utilizzato in modo diverso da quello per cui è stato concepito. Trust Care declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui il prodotto venga utilizzato, assemblato o modificato in modo diverso da quanto indicato nella presente descrizione. Controllare regolarmente la stabilità e la resistenza del prodotto e verificare che le viti siano serrate correttamente durante il montaggio.

Manutenzione e cura; Per motivi di igiene, si raccomanda di pulire regolarmente il prodotto. Si consiglia l'uso di detersivi privi di solventi con un pH compreso tra 5 e 9 o di alcool denaturato al 70%. Se necessario, il prodotto può essere igienizzato a un massimo di 85 gradi per circa 3 minuti.


Garanzia; Trust Care offre una garanzia di un anno che, tuttavia, non copre la normale usura, ad esempio i piedini in gomma.

Dati tecnici



Testato secondo la norma ISO 17966:2016, EN ISO 10993-1 per un peso massimo di 160 kg.

Altezza	64 - 81 cm
Altezza del sedile	41 - 58 cm
Profondità	51 - 59 cm
Larghezza	59 - 64 cm
Peso	3.1 kg

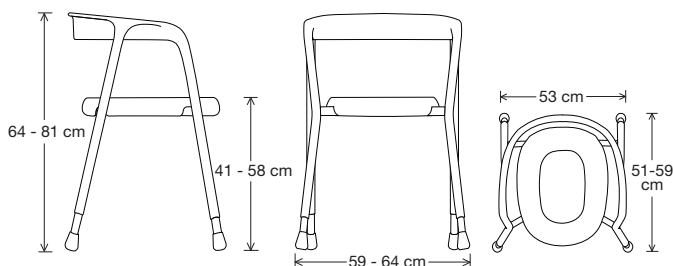

Let's Help Me. 大便秘器

Trust Careの新しくモダンなデザインの室内便器をご購入いただき誠にありがとうございます。なお、使用前にマニュアルを読むことが重要です。

目的と用途; 室内便器は、便座からよりスムーズに立ち上がりやすい方に最適です。Let's help Me のサポートにより、ニーズに応じてトイレに行くときに希望の高さの便座を簡単に設定できるようになりました。それだけでなく、簡単に設置できるタブ（写真10、11参照）を利用して自立式トイレとしても使用できます。空にするときは、蓋をかぶせてハンドルを持って持ち上げるだけで、自動的にロックされます（写真 12 を参照）。

伸縮式の脚を使用すると、希望の高さに簡単に設定でき、ゴム製の滑り止め脚を使用すると、本品をどのような表面に置いても安定した取り付けが可能になります（写真 8、9も参照）。背もたれとアームレストは人間工学に基づいた快適なデザインで、立ち上がりやすく、耐水性にも優れているため、バスルームやシャワーでのスツールとしても使用できます。

注記：本品は上に立つことを目的としたものではありません。

安全についての案内; 本品は本来の用途以外には使用しないでください。この説明に記載されている以外の方法で本品が使用、組み立て、または改造された場合、Trust Care は責任を負いません。本品の安定性と強度、組み立て中のネジが適切に締められていることを定期的に確認してください。


メンテナンスとお手入れ。衛生上の理由から、定期的に製品を清掃することをお勧めします。pH 5～9の無溶剤クリーナーまたは70%の消毒用アルコールをお勧めします。必要に応じて、本品は最大 85℃で約3分間除染できます。

保証; Trust Care は 1 年間の保証を提供しますが、ゴム製脚などの通常の磨耗は保証の対象外です。

データ技術

ISO 17966:2016, EN ISO 10993-1 に準拠、最大重量 160 kg に対して試験済み。

高さ	64 - 81 cm
座面の高さ	41 - 58 cm
覚悟	51 - 59 cm
幅	59 - 64 cm
重量	3.1 kg

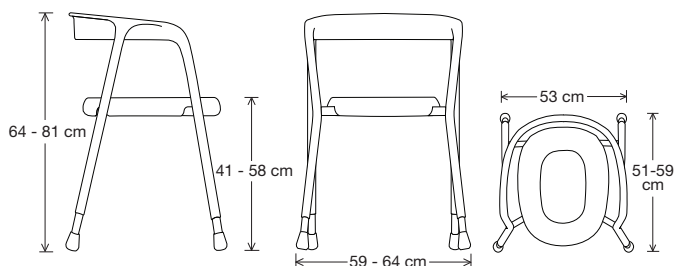

Let's Help Me. Toiletstoel.

Trust Care feliciteert je met je nieuwe, moderne toiletstoel. Let op, lees voor gebruik eerst de handleiding.

Functie en gebruik; Een toiletstoel helpt je om de wc gemakkelijker te kunnen gebruiken, met de Let's help Me kun je nu eenvoudig de gewenste zithoogte instellen bij een toiletbezoek. En er is meer: je kunt de gemakkelijk te plaatsen (zie foto's 10 en 11) toiletstoel ook gebruiken als vrijstaand toilet. Bij het ledigen doe je gewoon het deksel erop, dan til je het op aan het hendel, dat vervolgens automatisch vergrendelt (zie afbeelding 12).

Met de telescopische poten stel je eenvoudig de gewenste hoogte in en met de rubberen antislipvoetjes plaats je het product stabiel op elk oppervlak (zie ook foto's 8 & 9). De rug- en arMLEUNINGEN hebben een comfortabel en ergonomisch design waardoor je er gemakkelijk op en af komt. Omdat dit product ook waterbestendig is, kun je het ook gebruiken als kruk in de badkamer of onder de douche.

NOTA: Het product is NIET bedoeld om op te staan.

Veiligheidsinstructies; Het product mag niet op een andere manier worden gebruikt dan waarvoor het bedoeld is. Trust Care is niet verantwoordelijk als het product op een andere manier wordt gebruikt, gemonteerd of gewijzigd dan aangegeven in deze handleiding. Controleer regelmatig de stabiliteit en stevigheid van het product en of de schroeven tijdens de montage goed zijn aangedraaid.


Onderhoud en verzorging; Om hygiënische redenen wordt aanbevolen om het product regelmatig te reinigen. Oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen met een pH van 5-9 of 70% ontsmettingsalcohol worden aanbevolen. Indien nodig kan het product ontsmet worden bij maximaal 85 graden gedurende ongeveer 3 min.

Garantie; Trust Care biedt een garantie van één jaar, maar de garantie dekt geen normale slijtage, bijvoorbeeld van rubberen voetjes.

Technische gegevens €€


Getest volgens ISO 17966:2016,
EN ISO 10993-1 voor een
maximaal gewicht van 160 kg.

Hoogte	64 - 81 cm
Zithoogte	41 - 58 cm
Diepte	51 - 59 cm
Breedte	59 - 64 cm
Gewicht	3.1 kg

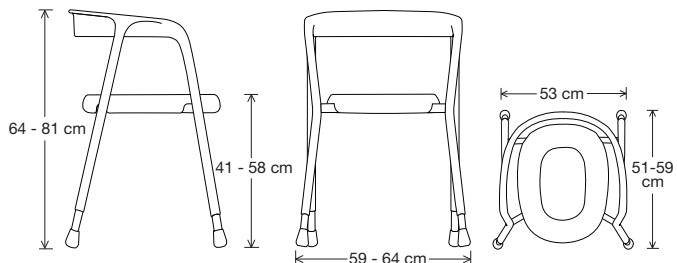

MATERIAL

1. Backrest - PP Plastic
2. Seat - PE Plastic
3. Frame - Aluminium
4. Feet - Rubber

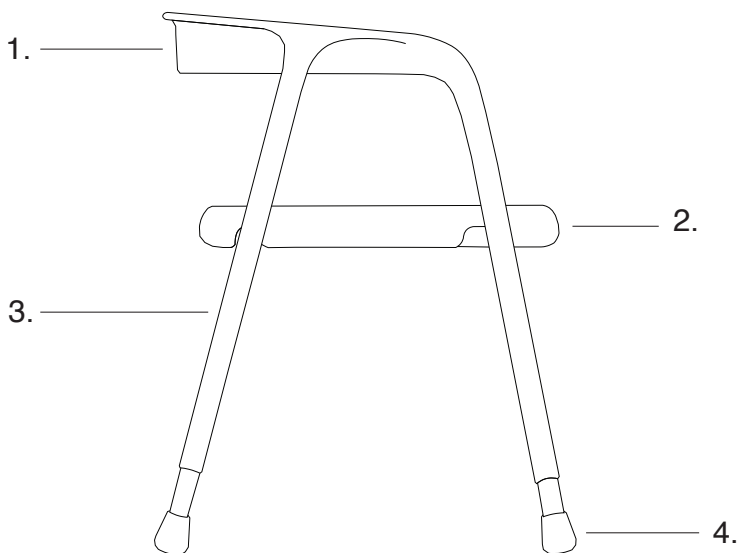

Återvinning / Genbrug / Recycling / Recycling / Recycling / Riciclaggio / Recyclage

This product should be recycled in accordance with national guidelines.

Dette produkt skal genanvendes i overensstemmelse med nationale retningslinjer.

Die Produktverpackung besteht aus Kunststoff und Wellpappe und wird entsprechend recycelt.

Este producto debe reciclarse de acuerdo con la normativa nacional.

Ce produit doit être recyclé conformément aux directives nationales.

Questo prodotto deve essere riciclato in conformità alle linee guida nazionali.

本品はお住まいの国のガイドラインに従ってリサイクルする必要があります。

Dit product moet worden gerecycled in overeenstemming met de nationale richtlijnen.