


Attends® Adjustable



Attends - Systemet med 10 absorptionsnivåer för inkontinens

Attends Adjustable är ett allt-i-ett skydd med elastiska sidoband framtaget för att hantera tung urin- och/eller avföringsinkontinens.

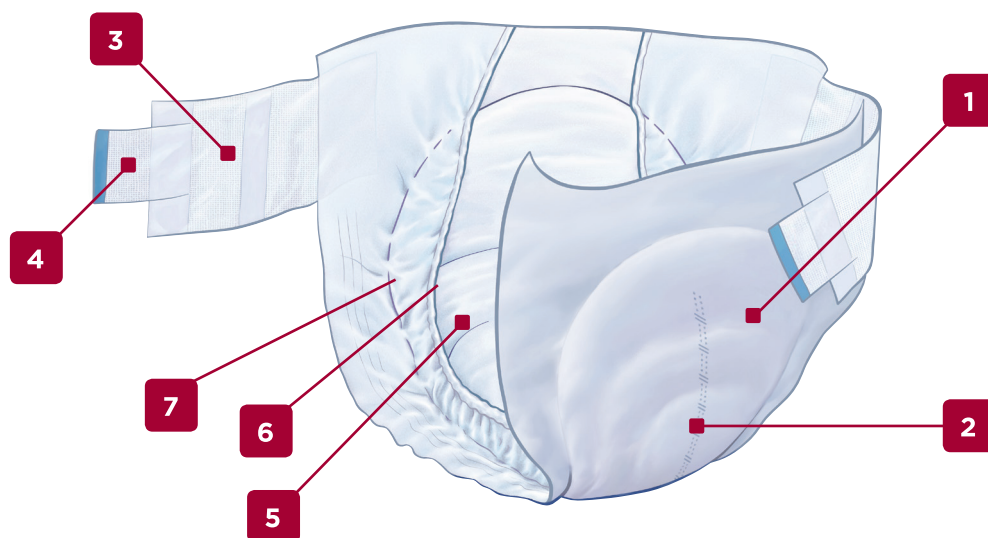



- 1** Andningsbart textilliknande spärrskikt ger ökad komfort, diskretion och god hudvård.
- 4** Återförlutningsbar kardborre/tejp som kan placeras var som helst på produktens främre del. Den kan öppnas, stängas och justeras för en optimal passform.

- 2** Information om skyddets storlek och absorptionsnivå finns tryckt tillsammans med våtindikatorn för enkel hantering av skydden på vårdhem och avdelningar.
- 5** Superabsorberande kärna med spridningsskikt för ökad läckagesäkerhet, torrhet och minskad lukt.

- 3** Mjuka, breda och elastiska sidoband som kan justeras vilket ger en personlig passform för optimal läckagesäkerhet, komfort och diskretion.
- 6** Läckagebarriärer reducerar risken för läckage.
- 7** Benelastik för optimal passform.

För mer information besök www.attends.se

Attends Adjustable

	Antal/Avd.förp Antal/Trp.förp	Attends Artikelnummer	Höftmätt/Midjemätt (cm)	Absorberande kärna	Spärskikt	Läckagebarriär	Ytskikt	Elastiska sidoband	Kardborre/tejp	Vikt (gram)	Abs. enligt ISO Rothwell (ml)
Attends Adjustable 10 M 	21 84	206454	80 - 110	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med spridningsskikt Quick-Dry	Andningsbar nonwoven	✓	Nonwo-ven	Ja	✓	108	2616
Attends Adjustable 10 L 	21 84	206652	100 - 140	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med spridningsskikt Quick-Dry	Andningsbar nonwoven	✓	Nonwo-ven	Ja	✓	162	3896

Våra produkter är CE-märkta, latex -och parfymfria



Naturlig Odour Protection

Naturlig Odour Protection minskar risken för otrevlig lukt.



Andningsbar

Andningsbart textilliknande spärskikt ger ökad komfort, diskretion och god hudhälsa.



Quick-Dry

Quick-Dry är det spridningsskikt som är placerat direkt under ytskiktet där urinen först når skyddet. Det leder snabbt bort urinen från ytan och ner i skyddets kärna och förhindrar samtidigt återvätning. Det kan hantera flera urintömningar utan att påverka skyddets kapacitet, vilket resulterar i bästa förutsättningen för god hudvård och läckagesäkerhet.



pH Värde

Kärnteknologin med de spiralformade fibrerna i spridningsskiktet hjälper till att garantera ett lågt pH-värde likt hudens naturliga pH. Detta hjälper till att skydda huden och bidra till god hudhälsa.



Active Zone

Active Zone är ett område centrerat i mitten av skyddet som erbjuder hög absorption där det verkligen behövs. Hög absorption ger torrhet och ökad läckagesäkerhet för användaren.



Attends Adjustable är testade och godkända av proDERM, institutet för dermatologisk forskning.